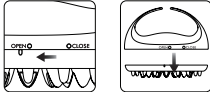
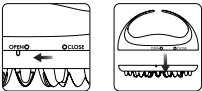
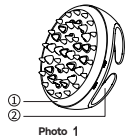
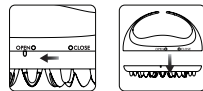


ZEEN CARE ROLL EASE BODY MASSAGER ZC-0826 	HR Upute za korištenje Roll Ease Body Massager Molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik PRIJE korištenja uređaja kako biste osigurali sigurnost i pouzdanost uporabe, te sačuvajte upute na sigurnom mjestu i prosljedite ih svim budućim vlasnicima. Sigurnosne upute UPOZORENJE Nemojte koristiti ovaj proizvod u sljedećim uvjetima: na koži s otvorenim ranama, ispucale ili otečene kože, dermatitisa, opekлина od sunca i teških akni; na kapcima. Odmah prestanite koristiti proizvod ako osjetite bilo kakvu bol ili nelagodu. OPREZ Uvijek provjerite proizvod prije upotrebe. Nemojte koristiti proizvod ako je oštećen ili slomljen, jer može oštetiti kožu. Nemojte stavljati proizvod pod vodu ili na vlažna mjesta na dulje vrijeme. Specifikacije proizvoda Naziv: Masažer tijela Roll Ease Model br.: ZC-0826B Materijal: ABS plastika + silikonska masažna ploča Uporaba: Ručna, s podešivim intenzitetom pritiska Opis proizvoda 1. Silikonska masažna ručka 2. Ručka  Slika 1	Napomene Provjerite stanje svoje kože ako prvi put koristite proizvod ili imate osjetljivu kožu. Pazite da ne nosite nakit/dodatke dok koristite proizvod. Kako instalirati/ukloniti masažnu ploču Za instalaciju: Usmjerite indikator na masažnoj ploči prema "Open" na ručki i okrenite ga dok se indikator ne poravna s "Close". Za uklanjanje: Okrenite indikator na masažnoj ploči dok se ne poravna s "Open" i povucite kako biste uklonili masažnu ploču.  Slika 2 Korištenje proizvoda 1.Stavite ruku u ručku i držite proizvod. Postavite silikonsku masažnu ploču na područje koje želite tretirati i masirajte prema preporuci. (Slika 3) • Vrat: masaža u pokretima prema dolje • Trbuh: masaža kružnim pokretima • Leđa: masaža u pokretima gore prema dolje • Ruke: masaža od donjeg prema gornjem dijelu • Noge: masaža od donjeg prema gornjem dijelu 2.Masirajte različita područja podešavajući intenzitet masaže od lagane do snažne, postupno smanjujući intenzitet masaže.  Slika 3
---	---	--

SLO Navodila za uporabo Roll Ease Body Massager Prosimo, pred uporabo naprave pazorno preberite ta priručnik, da zagotovite varno in zanesljivo uporabo. Navodila shranite na varno mesto in jih posredujte vsem prihodnjim lastnikom. Varnostna navodila OPOZORILO Ne uporabljajte tega izdelka v naslednjih primerih: na koži z odprtimi ranami, razpokano ali otečeno kožo, dermatitisom, sončnimi opeklinami, močnimi aknami ali na vekah. Takoj prenehajte uporabljati izdelek, če občutite kakršno koli bolečino ali nelagodje. POZOR Izdelek vedno preverite pred uporabo. Ne uporabljajte izdelka, če je poškodovan ali zlomljen, saj lahko poškoduje kožo. Izdelka ne potaplajte v vodo in ga ne puščajte na vlažnih mestih dalj časa. Specifikacije izdelka Ime: Masažer za telo Roll Ease Model št.: ZC-0826B Material: ABS plastika + silikonska masažna plošča Uporaba: Ručna, z nastavljivo jakostjo pritiska Opis izdelka 1. Silikonski masažni ročaj 2.Ročaj  Slika 1 Opombe Preverite stanje svoje kože, če prvič uporabljate izdelek ali če imate občutljivo kožo. Pazite, da med uporabo izdelka ne nosite nakita ali dodatkov.	Kako namestiti/odstraniti masažno ploščo Za namestitev: Poravnajte indikator na masažni plošči proti "Open" na ročaju in ga zavrtite, dokler se indikator ne poravna z "Close". Za odstranitev: Zavrtite indikator na masažni plošči, dokler se ne poravna z "Open" in potegnite, da odstranite masažno ploščo.  Slika 2 Uporaba izdelka 1.Vstavite roko v ročaj in držite izdelek. Namestite silikonsko masažno ploščo na območje, ki ga želite obdelati, in masirajte glade na priporočila. (Slika 3) • Vrat: masirajte s gubi navzdol • Trbuh: masirajte s krožnimi gibi • Hrbet: masirajte s gubi navgor in navzdol • Roke: masirajte od spodnjega proti zgornjemu delu • Noge: masirajte od spodnjega proti zgornjemu delu 2. Masirajte različna področja z nastavitvijo intenzivnosti masaže od blage do močne, postopoma zmanjšujte intenzivnost masaže.  Slika 3 Čiščenje in vzdrževanje 1. Ta izdelek se lahko opere z vodo. 2. Po čiščenju izdelek postavite na zračno mesto, da se posuši. Ne sušite ga na neposredni sončni svetlobi. 3. Ne uporabljajte alkohola, jeklene volne, abrazivnih čistil, kemikalij ali korozivnih tekočin za čiščenje tega izdelka.	 Odlaganje embalaže Embalaža se ne sme odlagati med gospodinske odpadke. Prosimo, ravajte v skladu z ustreznimi lokalnimi postopki za odlaganje. 	EN Guide for use Roll Ease Body Massager Please read this manual carefully BEFORE using the device to ensure safe and reliable operation. Keep the instructions in a safe place and pass them on to any future owners. Safety Instructions WARNING Do not use this product under the following conditions: on skin with open wounds, cracked or swollen skin, dermatitis, sunburn, severe acne, or on eyelids. Stop using the product immediately if you feel any pain or discomfort. CAUTION Always check the product before use. Do not use the product if it is damaged or broken, as it may harm the skin. Do not immerse the product in water or leave it in damp places for long periods. Product Specifications Name: Roll Ease Body Massager Model no.: ZC-0826B Material: ABS plastic + silicone massage plate Usage: Manual, with adjustable pressure intensity Product Description 1. Silicone massage handle 2.Handle  Photo 1 Notes Check the condition of your skin if you are using the product for the first time or if you have sensitive skin. Make sure not to wear jewelry or accessories while using the product.	How to Install/Remove the Massage Plate To install: Align the indicator on the massage plate with "Open" on the handle and rotate until the indicator aligns with "Close". To remove: Rotate the indicator on the massage plate until it aligns with "Open" and pull to remove the massage plate.  Photo 2 Using the Product 1.Insert your hand into the handle and hold the product. Place the silicone massage plate on the area you want to treat and massage according to the instructions. (Photo 3) • Neck: massage with downward movements • Abdomen: massage with circular movements • Back: massage with upward and downward movements • Arms: massage from the lower to the upper part • Legs: massage from the lower to the upper part 2.Massage different areas by adjusting the massage intensity from light to strong, gradually reducing the intensity.  Photo 3 Cleaning and Maintenance 1. This product can be washed with water. 2. After cleaning, place the product in a well-ventilated area to dry. Do not dry it in direct sunlight. 3. Do not use alcohol, steel wool, abrasive cleaners, chemicals, or corrosive liquids to clean this product.	 Packaging disposal Packaging must not be disposed of with household waste. Please follow appropriate local procedures for disposal. 
--	---	--	--	---	--